


mindray

CL-1200i

Хемилюминесцентный анализатор

Простой, но надежный

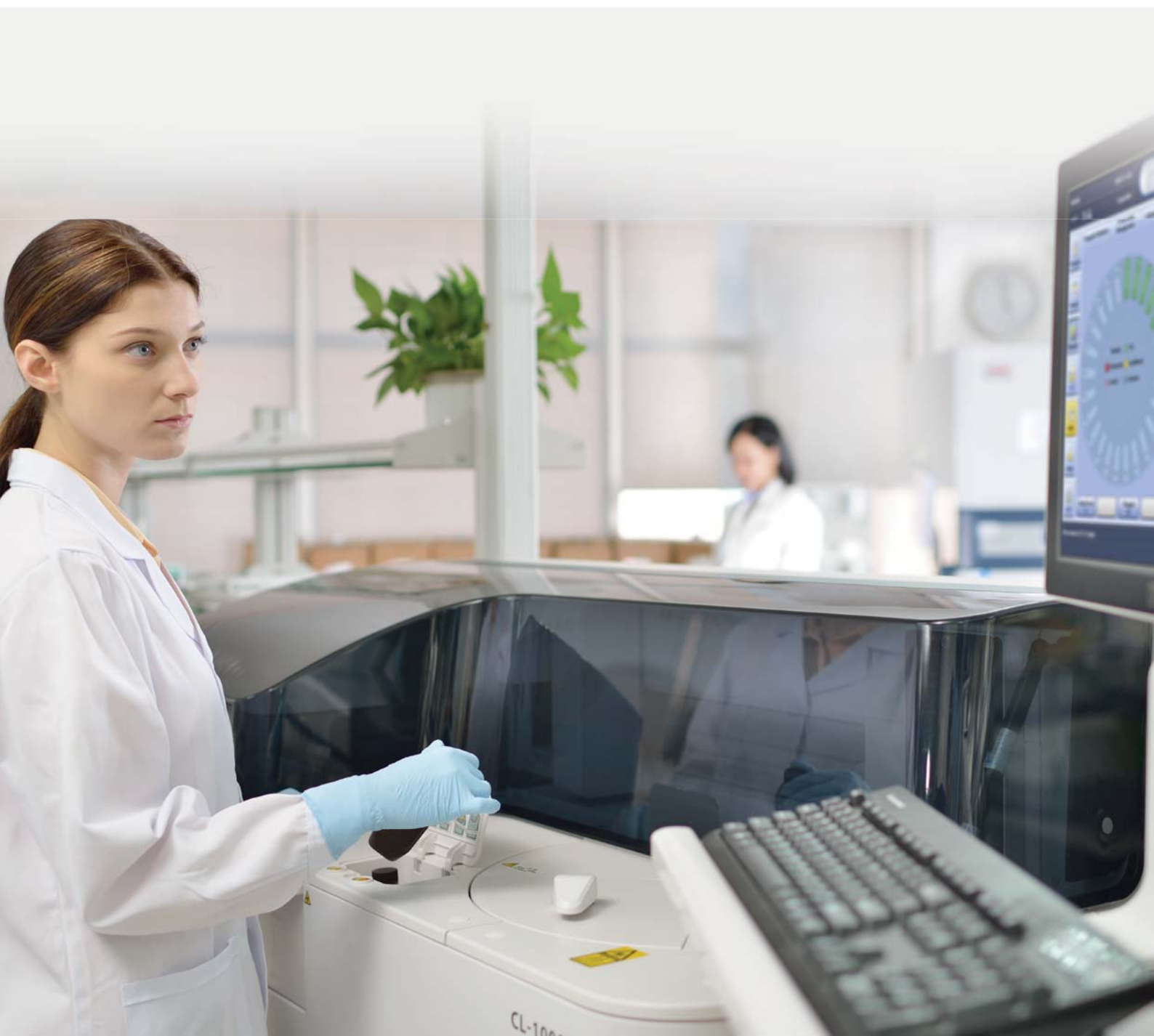



CL-1200i

Хемилюминесцентный анализатор



Реакционная зона

Улучшенная реакционная система и система детекции, использующая ФЭУ
4-этапное магнитное разделение
Точный контроль температуры
Автоматизированное перемешивание реакционного раствора вихревым без какой-либо контаминации



Зонд для образцов и реактивов

Точный шприцевой дозатор обеспечивает всасывание жидкости с высокой точностью
Программируемое определение уровня жидкости, обнаружение сгустков, защита от столкновения в горизонтальной и вертикальной плоскостях
Эффективная промывка зонда изнутри и снаружи промывочным буфером под высоким давлением
Программируемая улучшенная промывка зонда с мощным средством

Простой, но надежный



Русскоязычное программное обеспечение

Интуитивно понятный интерфейс программы
Единый программный интерфейс значительно сокращает затраты времени и сил на обучение
Легкий доступ к сенсорному экрану монитора на поворотном кронштейне (опционально)



Образцы

Загрузка и выгрузка штативов с образцами осуществляется без остановки работы анализатора
Унифицированные штативы для образцов
Статус штатива в реальном времени отображается цифровыми индикаторами
Возможно приоритетное выполнение анализа (STAT)



Расходные материалы

Доступ для загрузки кювет в любое время без паузы или остановки процесса
Одновременная загрузка 88*2 кювет; контейнер для отходов на 185 кювет
Индикация статуса кювет и контейнера для отходов в режиме реального времени



Реагенты

Жидкие, готовые к использованию реагенты, охлаждаемые до 2~8°C
Легкость обращения с реактивами и субстратом (2 флакона)
25 позиций для реагентов с постоянным перемешиванием парамагнитных частиц
Упаковки на 50 тестов и 100 тестов
Стабильность вскрытых реагентов, размещенных на анализаторе до 56 дней



Меню тестов

Щитовидная панель

свободный трийодтиронин (FT3)
свободный тироксин (FT4)
общий трийодтиронин (Т3)
общий тироксин (Т4)
тиреотропный гормон (TSH)
антитела к тиреоглобулину (anti-TG)
антитела к тиреоидной пероксидазе (anti-TPO)
тиреоглобулин(TG)

Опухолевые маркеры

раковый эмбриональный антиген (CEA)
альфа-фетопротеин (AFP)
раковый антиген 125 (CA125)
раковый антиген 15-3 (CA15-3)
раковый антиген 19-9 (CA19-9)
свободный ПСА (PSA)
общий ПСА (PSA)

Репродуктивная панель

общий β -ХГЧ (β -HGC)
фоликулостимулирующий гормон (FSH)
лютеинизирующий гормон (LH)
пролактин (PRL)
эстрадиол (E2)
эстриол (E3)
тестостерон (TESTO)
прогестерон (PGR)

Сердечные заболевания

креатинкиназа MB (CK-MB)
миоглобин
тропонин I
мозговой натрийуретический пептид (BNP)

Функция надпочечников

дегидроэпиандростерон-сульфат (DHEA-S)
кортизол

Технические характеристики

Общие сведения

Пропускная способность	до 180 тестов/час
Принцип измерения	Реагенты с микронными суперпарамагнитными частицами, мечеными щелочной фосфатазой, и субстрат AMPPD

Образцы

Штатив для образцов	10-позиционный штатив, единый для анализаторов BS-800/BS-2000/CL-2000i
Количество образцов	до 60 образцов
Объем образца на анализ	10~200 мкл, с шагом 1 мкл
Разведение образца	автоматическое разведение 1:2~1:80
Загрузка и выгрузка штативов	с образцами без прерывания процесса
Зонд для взятия образцов	стальной зонд, определение уровня жидкости, обнаружение сгустков, защита от столкновения в горизонтальной и вертикальной плоскостях

Реагенты

Диск для реактивов	25 позиций для реагентов, непрерывная загрузка, перемешивание магнитных частиц
Тестов в наборе	50 или 100 тестов в наборе
Система охлаждения	2~8°C
Дозирование реагентов	20~200 мкл, с шагом 1 мкл
Сканирование реактивов с применением встроенного/внешнего сканера штрих-кода	
Определение уровня жидкости, обнаружение пузырьков, защита от столкновения в горизонтальной и вертикальной плоскостях	

Субстрат

Объем флакона	300/500 тестов
Объем на 1 тест	200 мкл
Загрузка субстрата	возможна без остановки работы анализатора
Подогрев субстрата	постоянный

Магнитная сепарация

Разделительный блок	4-этапное магнитное разделение
Температура	точность: 37±0,3°C, колебания: ±0,2°C

Измерительная система

Детектор сигнала	фотоэлектронный умножитель (ФЭУ)
Калибровка ФЭУ	эталонный светодиодный модуль
Реакционная карусель	75 позиций
Перемешивание	бесконтактное, вортекс

Загрузка кювет и сбор отходов

Кюветы	одноразовые, пластиковые
Загрузка кювет	2x88 кювет, без прерывания работы
Контейнер отходов	185 кювет

Условия работы

Электропитание	220–240 В~, 50 Гц
Входная мощность	2000 ВА
Рабочая температура	15~30°C
Габаритные размеры	1400мм*760мм*600мм (Ш*Г*В)
Вес	250 кг

ООО «МИНДРЕЙ МЕДИКАЛ РУС»
129090, г. Москва, ул. Олимпийский пр., д. 16, стр. 5
Тел.: +7 499 553 60 36 Факс: +7 499 553 60 39
Телефон технической поддержки пользователей
8-800-333-53-23 (звонок по России бесплатный)
www.mindray.com

mindray
healthcare within reach

ДАННЫЙ МАТЕРИАЛ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ